



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Массажер-миостимулятор для ног и тела BODY RELAX (AST 300D)




СОДЕРЖАНИЕ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ	3
ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ ПРОДУКТА.....	3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДНЫХ ГЕЛЕВЫХ ПРОКЛАДОК	4
Использование	4
ВНИМАНИЕ!	5

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

- 1 Силиконовая зона электрода для ног
- 2 Инфракрасная зона дальнего действия
- 3 Массажных ролика для подошвы
- 4 Инфракрасная зона дальнего излучения
- 5 ЖК-экран
- 6 Ручка
- 7 Электродные площадки
- 8 Пульт дистанционного управления

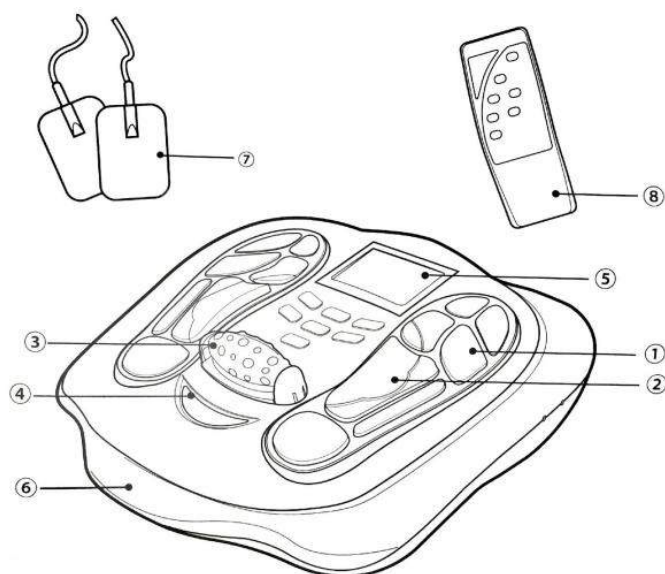

ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ ПРОДУКТА

Новый импульсный массажер для ног использует теорию рефлексологии для стимуляции акупунктурных точек под вашей подошвой, которые являются рефлексом для ваших внутренних органов, таких как легкие, сердце, почки, тонкая кишка, селезенка, тазовая область, гипофиз. Это просто стимуляция может улучшить кровообращение и снять головную боль напряжения, судороги ног, напряжение в шее и плече, боль в спине ...

Благодаря большому ЖК-экрану и синему светодиодному фонарю, пользователь может легко читать и выбирать программы и уровни.

Массажер для ухода за ногами включает 4 электродных гелевых прокладки, которые могут массажировать любые части тела, чтобы люди могли наслаждаться комфортным и эффективным массажем во время чтения, сидения, просмотра телевизора.

1. Принято к лучшим материалам ABS и разработано в соответствии с наукой человеко-машиностроения, элементы выглядят очень современно, модно и деликатно.
2. 99 видов интенсивности электромагнитных волн с непрерывной регулировкой, будут соответствовать вашему желаемому идеальному результату в правильной последовательности.
3. Автоматическая установка времени в течение 25 минут.
4. Существует 25 видов режимов массажа для подошвы и тела, каждый импульсный режим массажа улучшит различные симптомы и снимет усталость.
5. Этот аппарат имеет инфракрасные функции, использует инфракрасное излучение для точек, связанных с вашим телом, он может способствовать циркуляции крови.
6. Все функции могут управляться с пульта дистанционного управления, очень прост в использовании.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДНЫХ ГЕЛЕВЫХ ПРОКЛАДОК

Подсоедините выходной провод к электродным гелевым прокладкам. Затем подключите выходной провод к массажеру для ухода за ногами. Снимите защитную пленку с липких прокладок. Надежно прикрепите электродные гелевые прокладки к коже. Нажмите и удерживайте кнопку «Переключатель» в течение 3 секунд, чтобы включить и настройте режим стимулирования и выходную интенсивность по своему желанию. (На дисплее отобразится выбранный режим и уровень).

Использование

1. Поставьте ноги на устройство
2. Нажмите кнопку «Переключатель» на 3 секунды, чтобы включить устройство, затем ЖК-экран загорится синим
3. Затем вы можете настроить режим, нажав «MODEA \triangle » и «MODEV ∇ » для выбора различных программ, максимум 25 программ.
4. Увеличьте настройку интенсивности, нажав кнопку «SOLEA \triangle » «BODYA \triangle », или уменьшите настройку интенсивности, нажав кнопку «SOLEV ∇ » «BODYV ∇ ».
5. Вы можете настроить программу в любое время, но после повторной настройки программы интенсивность вернется к «0». Чтобы не шокировать

пользователя новой программой, пользователь должен заново отрегулировать интенсивность

6. Чтобы завершить период массажа, пользователь может выключить аппарат в любое время, нажав кнопку переключения в течение 3 секунд.

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, не склеивайте две клейкие прокладки.

Содержите клейкие прокладки в чистоте и никогда не подвергайте их воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.

Если электродные гелевые прокладки недостаточно клейкие или грязные, протрите их влажной тканью или замените новые. Не чистите электродные гелевые прокладки какими-либо химическими веществами.

Для защиты гелевых прокладок, пожалуйста, наденьте их на защитную прокладку после использования.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**